

# LE UL-7000 ZAPPER QUANTIQUE ORGO-LIFE® À L'ARGENT PURE, 3 dans 1



**Marque:** La Technologie Orgo-Life®

**Code produit:** UL-7000

**Disponibilité:** In Stock

**Poids:** 0.00kg

**Dimensions:** 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

**Prix:** \$357.50

## Courte description

## LE UL-7000 ZAPPER QUANTIQUE ORGO-LIFE® À L'ARGENT PURE, 3 dans 1

Disponible dans 1 jour le seul kit au monde 3 dans 1, d'Orgo-Life®

Une toute nouvelle technologie Quantum au niveau du circuit de l'appareil vous permet de :

1-Faire de l'eau Colloïdale fraîche tous les jours, pour garder votre système Globalement en meilleur forme (recommandé de faire en 20-30 minutes ou demandez à votre médecin)

2-Vous zappez les parasites tous les jours et affaiblissez les membranes de leurs cellules pour favoriser leurs éliminations.

-L'outil idéal pour ceux qui ont eu LA PICOUSE.

3 -Pour ceux qui ont la nouvelle série Thérapeutique Énergétique PRO, il sert aussi d'amplificateur pour votre unité Orgo-Life® et permet d'amplifier les ondes et énergies terrestre pour mieux être connecté à la terre (GRONDER)

-Viens avec une garantie de 3 ans, et un contrat de service si vous avez des problèmes

après de 3 années

## Description

# LE UL-7000 ZAPPER QUANTIQUE ORGO-LIFE® À L'ARGENT PURE, 3 dans 1

Disponible dans 1 jour le seul kit au monde 3 dans 1, d'Orgo-Life®

Une toute nouvelle technologie Quantum au niveau du circuit de l'appareil vous permet de :

1-Faire de l'eau Colloïdale fraîche tous les jours, pour garder votre système Globalement en meilleure forme (recommandé de faire en 20-30 minutes ou demandez à votre médecin)

2-Vous zappez les parasites tous les jours et affaiblissez les membranes de leurs cellules pour favoriser leurs éliminations.

-L'outil idéal pour ceux qui ont eu LA PICOUSE.

3 -Pour ceux qui ont la nouvelle série Thérapeutique PRO, il sert aussi d'amplificateur pour votre unité Orgo-Life® et permet d'amplifier les ondes et énergies terrestre pour mieux être connecté à la terre (GRONDER)

-Viens avec une garantie de 3 ans, et un contrat de service si vous avez des problèmes après de 3 années

*Nos appareils ne prétendent pas guérir une maladie ou une maladie. Avis de non-responsabilité : en cas de problème médical grave, veuillez demander l'aide et les conseils d'un professionnel de la santé qualifié. Les avantages potentiels pour la santé n'ont pas été évalués par les organismes nationaux de délivrance des licences médicales.*

## **PLUS DE DESCRIPTION À VENIR BIENTÔT**

### Galerie du produit

**Orgo-Life®**  
Product Code : UL-7000  
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145  
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145

Do not damage the silver on your unit and your colloidal silver rods, please use the special cleaning cloth that came with your Quantum Zapper Kit.  
N'abîmez pas l'argent de votre appareil et vos tiges d'argent colloïdal, veuillez utiliser le chiffon de nettoyage spécial fourni avec votre Kit Zapper Quantique.

[www.Orgo-Life.com](http://www.Orgo-Life.com)

**Orgo-Life®**  
Product Code : UL-7000  
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145  
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145

100% Pure Silver contact plates  
Plaques de contact 100% en Argent Pur

With full labeling usage instructions to properly operate the Zapper.  
Avec des instructions d'utilisation d'étiquetage complètes pour faire fonctionner correctement le zapper.

[www.Orgo-Life.com](http://www.Orgo-Life.com)

**Orgo-Life®**  
Product Code : UL-7000  
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145  
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145

The best place to do a treatment is under the foot. For approx. 30-45 minutes, but you can also use your arms legs etc. remember that pure silver may leave a little black spot which is normal, wash with soap.  
Le meilleur endroit pour faire un traitement est sous le pied. Pendant environ 30-45 minutes, mais vous pouvez également utiliser vos bras, vos jambes, etc. rappelez-vous que l'argent pur peut laisser une petite tache noire ce qui est normal, laver avec du savon.

[www.Orgo-Life.com](http://www.Orgo-Life.com)

**Orgo-Life®**  
Product Code : UL-7000  
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145  
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145

Use the velcro with the zapper to install the zapper on your foot.  
Utilisez le velcro avec le zapper pour installer le zapper sur votre pied.

[www.Orgo-Life.com](http://www.Orgo-Life.com)

**Orgo-Life®**  
Product Code : UL-7000  
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145  
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145




Put the zapper on, with the switch, and let it run for approx. 30-45 min., a light will show you that the zapper is turned on.  
Mettez le zapper en marche, avec l'interrupteur, et laissez-le tourner pendant environ 30-45 min., une lumière vous indiquera que le zapper est allumé.

[www.Orgo-Life.com](http://www.Orgo-Life.com)

**Orgo-Life®**  
Product Code : UL-7000  
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145  
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145

Put the zapper on, with the switch, and let it run for approx. 30-45 min., a light will show you that the zapper is turned on.  
Mettez le zapper en marche, avec l'interrupteur, et laissez-le tourner pendant environ 30-45 min., une lumière vous indiquera que le zapper est allumé.

[www.Orgo-Life.com](http://www.Orgo-Life.com)

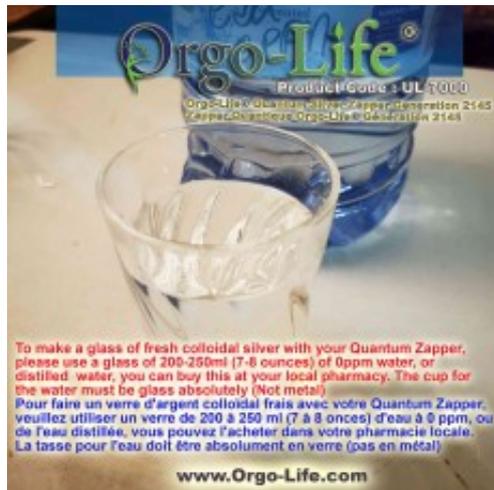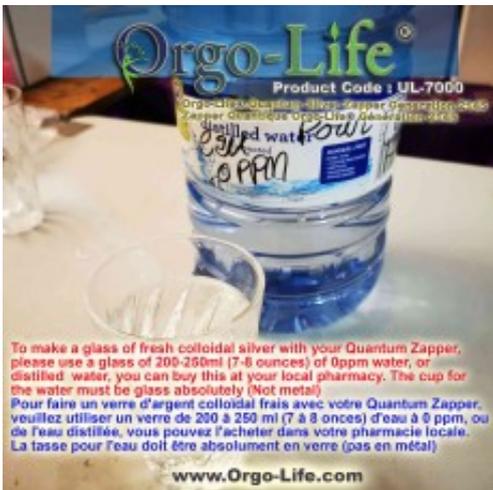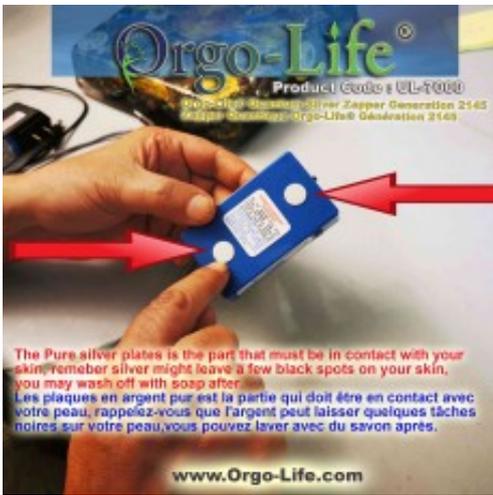

**Orgo-Life®**  
Product Code : UL-7000  
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145  
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145

To make a glass of fresh colloidal silver with your Quantum Zapper, please use a glass of 200-250ml (7-8 ounces) of 0ppm water, or distilled water, you can buy this at your local pharmacy. The cup for the water must be glass absolutely (Not metal)

Pour faire un verre d'argent colloïdal frais avec votre Quantum Zapper, veuillez utiliser un verre de 200 à 250 ml (7 à 8 onces) d'eau à 0 ppm, ou de l'eau distillée, vous pouvez l'acheter dans votre pharmacie locale. La tasse pour l'eau doit être absolument en verre (pas en métal)

[www.Orgo-Life.com](http://www.Orgo-Life.com)

**Orgo-Life®**  
Product Code : UL-7000  
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145  
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145

Then let the zapper run for approximate 25-30 minutes, as shown in the picture.

Ensuite, laissez le zapper fonctionner pendant environ 25 à 30 minutes, comme indiqué sur l'image.

[www.Orgo-Life.com](http://www.Orgo-Life.com)

**Orgo-Life®**  
Product Code : UL-7000  
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145  
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145

Remember your zapper unit and Colloidal silver rods are made to make 1-3 glasses of fresh water everyday, (using it between 25-30 minutes). The unit is not designed to make 1 gallon or bigger quantities, such as more commercial usage. It is designed just for your personal usage. The silver rods will wear out in time, you can purchase new rods with Orgo-Life Technology anytime on our website.

N'oubliez pas que votre unité zapper et les tiges d'argent colloïdal sont faites pour fabriquer 1 à 3 verres d'eau fraîche tous les jours (en utilisant entre 25 et 30 minutes/verre). L'unité n'est pas conçue pour fabriquer des quantités de 1 gallon ou plus, telles qu'un usage plus commercial. Il est conçu uniquement pour votre usage personnel. Les tiges d'argent s'useront avec le temps, vous pouvez acheter de nouvelles tiges avec Orgo-Life Technology à tout moment sur notre site Web.

[www.Orgo-Life.com](http://www.Orgo-Life.com)

**Orgo-Life®**  
Product Code : UL-7000  
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145  
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145

Then with your Quantum Zapper and Silver rods kit, you can make a glass of fresh colloidal silver within 25-30 minutes.

Ensuite avec votre kit d'argent colloïdal et votre Zapper Quantique, vous pourrez faire un verre d'argent colloïdal frais dans les 25 à 30 minutes.

[www.Orgo-Life.com](http://www.Orgo-Life.com)

**Orgo-Life®**  
Product Code : UL-7000  
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145  
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145

A fully charged battery should give you approx. 10 hours of usage of your zapper, before recharging the battery

Une batterie complètement chargée devrait vous donner environ 10 heures d'utilisation de votre zapper, avant de recharger la batterie

[www.Orgo-Life.com](http://www.Orgo-Life.com)

**Orgo-Life®**  
Product Code : UL-7000  
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145  
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145

For those who own an Orgo-Life Therapeutic PRO series, there is two cables on your unit, the one with the mini 1/8 plug is to be connected to your zapper for a special wave boost.

Pour ceux qui possèdent une série Orgo-Life Therapeutic PRO, il y a deux câbles sur votre appareil, celui avec la prise mini 1/8 est à connecté à votre zapper pour un boost d'ondes spéciales.

[www.Orgo-Life.com](http://www.Orgo-Life.com)

